


## ECM, le spécialiste de la prévention de l'hypothermie peropératoire !



FABRIQUÉ EN  
**FRANCE**  
MADE IN

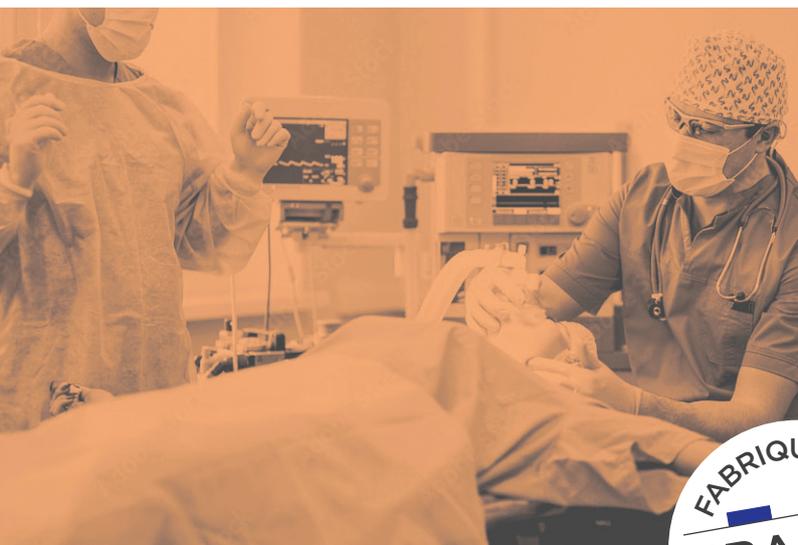

- Facile d'utilisation
- En toute sécurité
- Fabrication française

Parce que des preuves cliniques ont démontré que l'hypothermie peropératoire peut induire des complications pour les patients, les couvertures chauffantes CB48 sont des systèmes de réchauffement actifs de patient, dédiés au bloc opératoire.



# Les couvertures chauffantes pour bloc opératoire CB48

Ces couvertures CB48 ne se servent pas de la technologie d'air pulsé, mais possèdent un circuit intégré dans une cartouche (bruits et particules ainsi évités). Les coûts sont aussi maîtrisés car elles sont réutilisables et ne nécessitent pas de consommables.

Les couvertures sont pilotées par un boîtier électronique de commande BCB48.



## FACILITÉ D'UTILISATION :

- Plusieurs tailles proposées toutes compatibles avec le même boîtier BCB48.

	<i>Largeur</i>	<i>Longueur</i>
CB48-2 : Demi-corps pédiatrique	80cm	100cm
CB48-3 : Haut du corps	50cm	150cm
CB48-11 : Corps entier	100cm	150cm

- Choisir la température de 30 à 40°C avec le bouton de réglage sur le boîtier BCB48 et mettre le moniteur en marche.
- Les couvertures recouvertes d'une housse en PU se nettoient très facilement après utilisation avec une solution nettoyante et désinfectante de surface.



## EN TOUTE SÉCURITÉ :

- Equipées de 8 capteurs indépendants de température pour un fonctionnement précis et une sécurité maximum
- Dotées d'alarmes sonores et visuelles pour alerter le personnel en cas de :
  - Rupture de l'élément chauffant ou conducteur dans la couverture
  - Défaut capteur de température
  - Trop grande différence de température
  - Température supérieure à 43°C
  - Coupure du courant
  - Défaut carte mère
- Alimentation en courant continu à basse tension : 48V, pour éviter tout parasitage avec les moniteurs



## FABRICATION FRANÇAISE :

ECM conçoit et fabrique depuis 1991 des dispositifs de réchauffement de patients pour le milieu hospitalier dans son usine de production à Saint Léonard de Noblat près de Limoges.





# Les couvertures chauffantes pour bloc opératoire CB48

Les références :

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Couverture chauffante de bloc pédiatrique	CB48-2+BCB48
Couverture chauffante de bloc adulte (haut du corps)	CB48-3+BCB48
Couverture chauffante de bloc adulte (corps entier)	CB48-11+BCB48

Le boîtier BCB48 et les couvertures sont également disponibles seuls.



Les accessoires :

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Support couverture pour pied à sérum	SUPPS



## LA QUALITÉ FRANÇAISE ECM

### Marquage CE 0459

Les couvertures chauffantes sont des dispositifs médicaux de classe IIb. Ils sont conformes à la réglementation Européenne en vigueur.

### Service après-vente

ECM assure la maintenance et la réparation des couvertures chauffantes. Contactez notre SAV au : +33 5 55 56 32 40.

### Garantie ECM

Les couvertures chauffantes ECM sont garanties 12 mois (dans les conditions normales d'utilisation). La garantie ne couvre pas les défauts d'entretien de la part de l'utilisateur.



ECM - Electro Concept,  
Une société de Spengler Group  
4 Bd. Henri Barbusse, 87400, Saint Léonard de Noblat, FRANCE

Tél. : +33 5 55 56 32 40  
Mail : [contact@electroconceptmedical.fr](mailto:contact@electroconceptmedical.fr)  
Web : [www.electroconceptmedical.fr](http://www.electroconceptmedical.fr)