


ECM prend soin des tout-petits patients en proposant son **matelas chauffant PrimaLéo** conçu pour le réchauffement des nouveaux nés dans les services de **néonatalogie** et de **maternité**.



- Confortable pour le bébé
- Simplicité d'utilisation et sécurité
- Fabrication française

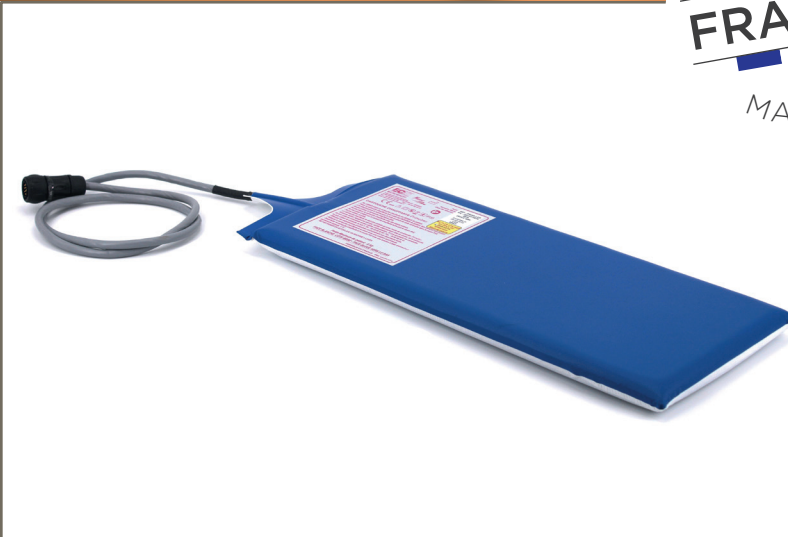

Matelas chauffant PrimaLéo

Amovible, le **PrimaLéo** a été développé pour être utilisé dans la plupart des berceaux. Il se compose d'un boîtier, d'une cartouche chauffante et d'un cocon.



CONFORTABLE POUR LE BÉBÉ :

- La cartouche chauffante est faite d'un matelas en gel ainsi que de mousses de protection la rendant plus douce.
- Le cocon en PU, très confortable, permet au bébé d'être bien calé pour plus de confort et de sécurité.



SIMPLICITÉ D'UTILISATION ET SÉCURITÉ :

- La mise en route et le réglage du système de chauffe se font en quelques secondes
- Un système électronique de 8 capteurs de température offrant une sécurité de chauffage et une efficacité avec une puissance de seulement 40W (pas de parasitage avec d'autres moniteurs)
- Une sonde de température cutanée avec alarmes pour les seuils haut et bas. L'écran du boîtier affiche ainsi la T° cutanée du bébé et celle du matelas.
- Nettoyage et désinfection (à l'ammonium quarternaire) rendus plus faciles grâce à une soudure étanche de la feuille supérieure et celle inférieure du cocon.



FABRICATION FRANÇAISE :

ECM conçoit et fabrique depuis 1991 des dispositifs de réchauffement de patients pour le milieu hospitalier dans son usine de production à Saint Léonard de Noblat près de Limoges.

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Chauffe-bébé PrimaLéo - Matelas chauffant	PRIMALEO



EUROCARE SAS
8-10 Rue Ernest Gouin
78 290 Croissy-Sur-Seine – France



Tél : 01.30.09.28.88
Web : www.eurocare.fr

LA QUALITÉ FRANÇAISE ECM

Marquage CE 0459

Les matelas chauffants sont des dispositifs médicaux de classe IIb. Ils sont conformes à la réglementation Européenne en vigueur.

Service après-vente

ECM assure la maintenance et la réparation des matelas chauffants.
Contactez notre SAV au : +33 5 55 56 32 40.

Garantie ECM

Les matelas chauffants ECM sont garantis 12 mois (dans les conditions normales d'utilisation). La garantie ne couvre pas les défauts d'entretien de la part de l'utilisateur.



ECM - Electro Concept,
Une société de Spengler Group
4 Bd. Henri Barbusse, 87400, Saint Léonard de Noblat, FRANCE

Tél. : +33 5 55 56 32 40
Mail : contact@electroconceptmedical.fr
Web : www.electroconceptmedical.fr